LINEA PROTESICA ***FAST SLIM*** per *CONOMET sTS* e *TS* e *PROSHAPE sTS* e *TS*

La Linea Protesica **FAST SLIM** è stata progettata **per semplificare la realizzazione di protesi totali avvitate a carico immediato**, parallelizzando impianti con divergenze significative, situazione generalmente presente nella regione distale, nel contesto di progetti protesici complessi quali sono i trattamenti di pazienti totalmente edentuli. Il carico immediato di protesi totali provvisorie apporta significativi benefici ai pazienti in termini di tempi di realizzazione estremamente brevi e di costi contenuti.

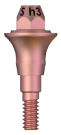
Grazie alla Linea FAST SLIM, il professionista può infatti progettare in "Day-Surgery", l'inserimento degli impianti e la contestuale protesizzazione provvisoria in attesa del lavoro definitivo.

I casi clinici in cui usare le **Basi FAST SLIM** con i relativi **dispositivi per Basi FAST SLIM** sono i pazienti con Impianti **Conomet sTS e TS** e Impianti **Proshape sTS e TS.**

A seconda dell'inclinazione degli impianti inseriti, sono disponibili differenti angolazioni di Basi FAST SLIM per parallelizzare l'asse protesico d'inserzione della sovrastruttura avvitata: 0° - 17° per sTS, 0° - 17° - 30° per TS.

Le **Basi FAST SLIM** e i **dispositivi per Basi FAST SLIM** sono identificati, ove opportuno, con **marcatura S o FAST S**.

Per non compromettere la corretta funzionalità protesica, con le **Basi FAST SLIM** usare **solo** la versione **FAST SLIM** di **Accessori Chirurgici, Dispositivi per presa d'impronta, Componenti Protesiche** e **Viti**, precisati di seguito.

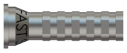
diametro	Ø 3,3		Ø 3,8 - Ø 4,2 - Ø 4,6 - Ø 5,1		
linea protesica	sTS		TS		
	ht 2	ht 3	ht 2	ht 3	ht 4
BASI FAST SLIM 0°	 2405930	 2405931	 2405940	 2405941	 2405942
BASI FAST SLIM 17°	 2405934	 2405935	 2405950	 2405951	 2405952
BASI FAST SLIM 30°	/	/	 2405960	 2405961	 2405962

Tutte le Basi FAST SLIM 0° (diritte) sono fornite già confezionate con un carrier in peek premontato sulla Base FAST SLIM, per il primo trasporto in cavo orale e per il primo avvitamento sull'impianto.

Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nei relativi Protocolli Clinici CL 010 PRIME CONOMET, CL 011 PROSHAPE e nelle relative eIFU (Istruzioni per l'Uso Elettroniche). Le raccomandiamo di consultare sempre le versioni in vigore di eIFU e Protocolli, disponibili nella sezione www.prodentitalia.eu/eifu del Sito di Prodent Italia.

DISPOSITIVI per PRESA IMPRONTA e COMPONENTI PROTESICHE per ***Basi FAST SLIM***

I **dispositivi per Basi FAST SLIM** non devono essere usati con le **Basi FAST** per non comprometterne la corretta funzionalità protesica.

	Dispositivo unico	Viti di fissaggio
MONCONE FAST SLIM	 0805936	 0805667
MONCONE FAST SLIM h 7	 0805939	 0805667
CALCINABILE PER MONCONE FAST SLIM	 0805938	
MONCONE CALCINABILE FAST SLIM	 0805937	 0805667
ANALOGO FAST SLIM	 0809210	
ANALOGO DIGITALE FAST SLIM	 0809420	 0809410
TRANSFER DI PRECISIONE FAST SLIM	 0807310	 0807301
SCANMARKER FAST SLIM	 0807426	 0805667

Per la **progettazione dei manufatti protesici** digitali, utilizzare **SOLO** le **librerie digitali** dedicate alla **Linea Protesica FAST SLIM.**

ACCESSORI CHIRURGICI per ***Basi FAST SLIM***

FRESA COUNTERSINK FAST

Da utilizzarsi, connessa al Contrangolo, dopo l'inserimento dell'impianto, in combinazione con l'apposita guida, per ricavare nell'osso corticale la sede necessaria al corretto inserimento delle Basi FAST angolate.
Per le Basi FAST dedicate alla linea protesica TS possono essere utilizzate entrambe le varianti di Frese Countersink Fast (con o senza anello).



0803300

GUIDE sTS e TS PER FRESA COUNTERSINK FAST

Da utilizzare, connessa all'impianto inserito nel sito, per il corretto utilizzo della Fresa Countersink FAST, per proteggere la testa degli impianti durante la procedura di rettifica della cresta ossea. **Non usare la Guida per Fresa Countersink FAST dedicata solo agli impianti con connessione SM (cod. 0807304, 0807302 e 0807303).**



sTS
2410301 (4 pz.)



TS
2410300 (4 pz.)

CARRIER PER BASI FAST SLIM 17°/ 30°

Strumento di trasporto nel cavo orale delle Basi FAST SLIM 17°/ 30°, marcato S, utile anche per il corretto orientamento durante la connessione delle Basi agli impianti.



0810146

CAPPETTA DI GUARIGIONE FAST SLIM

Componente, marcato FAST S, utile alla protezione della connessione FAST SLIM nelle fasi di attesa che precedono la protesizzazione di strutture avvitate nel carico immediato avvitato.



0806305

Linea Protesica FAST disponibile solo per casi clinici in cui sono già state usate Basi FAST

LINEA PROTESICA ***FAST*** solo per *CONOMET TS* e *PROSHAPE TS*

Le **Basi FAST** devono essere utilizzate **SOLO** con i dispositivi dedicati alla Linea Protesica **FAST:** l'uso di dispositivi dedicati alla Linea Protesica **FAST SLIM** ne compromette la corretta funzionalità protesica.

I casi clinici in cui usare le **Basi FAST** con i relativi **dispositivi FAST** sono le **riprotesizzazioni** in cui sono state usate le **Basi FAST**.

Per non compromettere la corretta funzionalità protesica, con le **Basi FAST** usare **solo** la versione **FAST** di **Accessori Chirurgici, Dispositivi per presa d'impronta, Componenti Protesiche** e **Viti**, precisati di seguito.

Le Basi FAST sono disponibili nelle varianti riportate di seguito.

	ht 2	ht 3	ht 4
BASI FAST 0°	 2405900	 2405902	 2405901

Le Basi FAST TS 0° sono fornite già confezionate con un Carrier in PEEK premontato sulla Base, da usare per il primo trasporto in cavo orale e per il primo avvitamento sull'impianto.

	ht 2	ht 3	ht 4
BASI FAST 17°	 2405910	 2405912	 2405911
BASI FAST 30°	 2405920	 2405922	 2405921

Le Basi FAST TS 17° e 30° devono essere trasportate in cavo orale e posizionate nell'impianto tramite l'apposito **Carrier per Basi FAST 17°/ 30°**, identificato con codice **0810141**. Sono confezionate con la relativa Vite fissaggio: per eventuali sostituzioni, usare la Vite identificata con codice **2405001**.

ACCESSORI CHIRURGICI per ***Basi FAST***

FRESA COUNTERSINK FAST

Da utilizzarsi, connessa al Contrangolo, dopo l'inserimento dell'impianto, in combinazione con l'apposita guida, per ricavare nell'osso corticale la sede necessaria al corretto inserimento delle Basi FAST angolate.
Per le Basi FAST dedicate alla linea protesica TS possono essere utilizzate entrambe le varianti di Frese Countersink Fast (con o senza anello).



0803300

GUIDA TS PER FRESA COUNTERSINK FAST

Da utilizzare, connessa all'impianto inserito nel sito, per il corretto utilizzo della Fresa Countersink FAST, per proteggere la testa degli impianti durante la procedura di rettifica della cresta ossea. **Non usare la Guida per Fresa Countersink FAST dedicata solo agli impianti con connessione SM (cod. 0807304, 0807302 e 0807303).**



TS
2410300 (4 pz.)

CARRIER PER BASI FAST 17°/ 30°

Strumento di trasporto nel cavo orale delle Basi FAST 17°/30°, utile anche per il corretto orientamento durante la connessione delle Basi agli impianti.

0810141 

CAPPETTA DI GUARIGIONE FAST

Componente utile alla protezione della connessione FAST nelle fasi di attesa che precedono la protesizzazione di strutture avvitate nel carico immediato avvitato.

0806300 

Nelle fasi di attesa che precedono la protesizzazione di strutture avvitate nel carico immediato avvitato, deve essere utilizzata la **Cappetta di Guarigione FAST**, identificata con codice **0806300**.

Linea Protesica FAST disponibile solo per casi clinici in cui sono già state usate Basi FAST

DISPOSITIVI per PRESA IMPRONTA e COMPONENTI PROTESICHE per ***Basi FAST***

I **dispositivi per Basi FAST** non devono essere usati con le **Basi FAST SLIM** per non comprometterne la corretta funzionalità protesica.

	Dispositivo unico	Viti di fissaggio
MONCONE FAST	 0805930	 0805935
CALCINABILE PER MONCONE FAST	0805932	
MONCONE CALCINABILE FAST	 0805931	 0805935
ANALOGO FAST	 0809200	
ANALOGO DIGITALE FAST	 0809405	 0809410
TRANSFER DI PRECISIONE FAST	 0807300	 0807301
SCANMARKER FAST	 0807420	 0805935

Per la **progettazione dei manufatti protesici** digitali, utilizzare **SOLO** le **librerie digitali** dedicate alla **Linea Protesica FAST.**

Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nei relativi Protocolli Clinici CL 010 PRIME CONOMET, CL 011 PROSHAPE e nelle relative eIFU (Istruzioni per l'Uso Elettroniche). Le raccomandiamo di consultare sempre le versioni in vigore di eIFU e Protocolli, disponibili nella sezione www.prodentitalia.eu/eifu del Sito di Prodent Italia.